

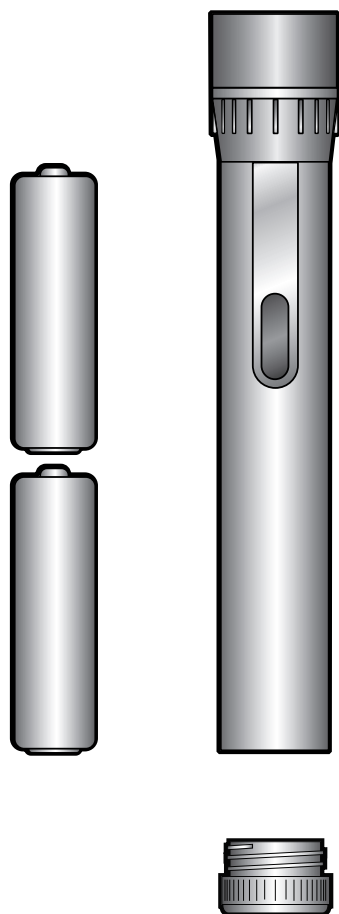


KEELER LOMMEHÅNDTAG

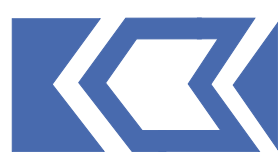


LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT

 Keeler

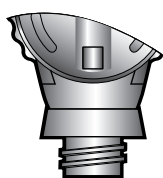


Påsættelse af instrumenthovedet på håndtaget

Forbindelsen mellem instrumenthovedet til håndtag er et gevind. Sæt instrumenthovedet på som vist og drej med uret. Sørg for at forbindelsen mellem hoved og håndtag er positiv.

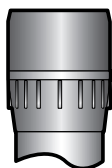

Kompatibilitet

Keeler Specialist, Professional, Standard, Practitioner og oftalmoskoper og Keeler er retinoskoper er kompatible med Keeler Vista 2,8v og 3,6v håndtag.

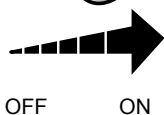

On/off-lysstyrkekontrol

Instrumentet slås til ved at dreje lysstyrkekontrollen til højre, som vist. Instrumentet slås fra ved at dreje lysstyrkekontrollen til venstre, som vist.

Isætning/udskiftning af batterier

Skru batterihætten af, sæt batterierne i og sæt hætten på igen, som vist.

Der skal bruges følgende tørbatterier:

Keeler lommehåndtag - 2 x 1,5v AA tørbatterier - Duracell MN 1500 eller tilsvarende.

Rengøringsvejledning

Instrumentet må kun gøres rent manuelt og uden at blive sænket ned i væske, som beskrevet herunder:

1. Tør overfladerne af med en ren absorberende, fnugfri klud, hårdt vredet op i en vand/vaskemiddelopløsning (2% i volumenprocent) eller vand/isopropylalkohol (70% i volumenprocent).
2. Sørg for at overskydende opløsning ikke løber ind i instrumentet. Vær omhyggelig med at kluden ikke er gennemvædet i opløsning.
3. Overfladerne skal tørres omhyggeligt efter med en ren, fnugfri klud.
4. Bortskaf det brugte rengøringsmateriale på en sikker måde.

Garanti & service

Ingen brugerservicérbare dele - al forebyggende vedligeholdelse og servicering må kun udføres af repræsentanter, der er godkendt af Keeler.

Håndtag fra Keeler er garanteret i 3 år og vil blive udskiftet eller repareret vederlagsfrit under forudsætning af følgende:

1. Fejlen skyldes defekt fabrikation
2. Købsbevis skal følge med hvert krav.

FREMSTILLET I UK AF:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tlf.: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

FRIKALD: 0800 521 251

DISTRIBUERET AF:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Frikald: 1 800 523 5620

Tlf.: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

'CE-mærket på dette produkt |
angiver, at det er afprøvet ☐
efter og opfylder kravene i ☐
direktivet om medicinsk ☐
udstyr, 93/42/EØF'



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distributør